

Nimbo

El andador posterior Nimbo ayuda al usuario a mantener una postura erguida.

Adecuado para niños con parálisis cerebral y otras patologías neurológicas.



KA 2200N

- Estructura plegable, ligera y robusta de aluminio.
- Ajuste de la altura sin herramientas. Mangos con contornos redondeados que permiten un agarre firme y confortable.
- Ruedas suaves de caucho que se adhieren a cualquier superficie y evitan que el andador se deslice hacia atrás.
- Ruedas traseras fijas con mecanismo de antiretroceso.
- Ruedas delanteras giratorias que mejoran la maniobrabilidad y la facilidad de giro.
- Incluye bloqueo direccional en ruedas delanteras para garantizar una marcha lineal.



KA 1200N

Disponible en cinco tallas con una gama de accesorios opcionales

| Referencia | Tallas | Altura puños | Ancho Total | Ancho entre puños | Peso | Carga máx. |
|------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|------|------------|
| KA 1200N | Andador infantil | 39 - 50 cm | 61 cm | 34 cm | 4 kg | 34 kg |
| KA 2200N | Andador junior | 48 - 64 cm | 61 cm | 34 cm | 5 kg | 39 kg |
| KA 3200N | Andador juvenil | 50 - 70 cm | 66 cm | 38 cm | 6 kg | 68 kg |
| KA 4200N | Andador juvenil-adulto | 71 - 91 cm | 67 cm | 42 cm | 6 kg | 86 kg |
| KA 5200N | Andador adulto | 92 - 104 cm | 74 cm | 46 cm | 7 kg | 113 kg |

accesorios



Soportes de antebrazo

Ref.: KA 1035 FPS Pequeño

Ref.: KA 1035 FPL Grande

Soportes de antebrazo


- Altura y profundidad regulables.
- Las asas se extienden hacia delante o hacia atrás a la posición deseada. Ángulos de pronación y supinación modificables.
- Tiras de velcro para evitar el deslizamiento lateral de los brazos.
- Se incluyen espaciadores para aumentar el rango lateral.



Asiento arnés

Ref.: CE 1070S Pequeño

Ref.: CE 1070L Grande

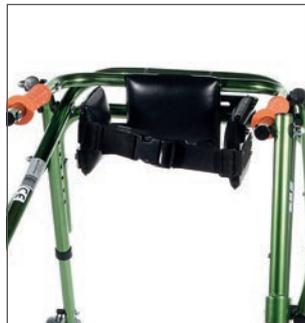

Estabilizador pélvico

Ref.: KA 1050

Asiento arnés

El arnés del asiento añade soporte al usuario.

Útil como arnés de seguridad que ayuda a soportar el peso y a mantener la postura pélvica correcta.

- Se mueve con el patrón de marcha del usuario y le permite cambiar el peso de una pierna a la otra.
- Las correas se pueden alargar, acortar y colocar hacia delante o hacia atrás del andador para adaptarse a los requisitos de apoyo del usuario.

Estabilizador pélvico

- Recomendado a usuarios que tienen una postura asimétrica de pie o andando y que no pueden centrarse en el andador.
- Altura y ancho ajustables.



Regulador de velocidad. Par.

Ref.: KA 1400

Permite variar la resistencia en una o ambas ruedas para controlar la velocidad y alinear patrones de marcha asimétricos.



Ruedas delanteras 23cmø

Ref.: Para modelo
KA 8100 ...|KA 2200N
|KA 5200N

KA 8100S.. KA 1200N
Son regulables en altura y no giran.

Asiento rígido

El asiento se monta fácilmente en el andador para dar una plataforma de descanso cuando sea necesario. Se pliega fácilmente para andar y se coloca otra vez para descansar.



Bumpers. Par.

Ref.: KA 8000



Asiento rígido

Ref.: Para modelo
KA 1285 ... KA 1200N
KA 2285 KA 2200N
KA 3285 KA 3200N
KA 4285 KA 4200N
KA 5285 KA 5200N