



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Elevadores de WC económicos

AD509

<https://www.ayudasdinamicas.com/elevadores-de-wc-economicos/>



Descripción

Este económico pero seguro y eficaz elevador es de plástico completamente sellado, que resiste los olores y las manchas. El acabado suave facilita las transferencias laterales y su recorte trasero de gran tamaño, para el coxis, proporciona una postura cómoda, y fácil acceso para la higiene personal. Se adapta a la mayoría de retretes sin necesidad de obras o instalaciones y con sólo apretar las dos palomillas laterales el elevador se mantendrá seguro y firme sobre la taza del WC.

Escoger el asiento adecuado




En la mayoría de casos, las caderas y las rodillas deberían estar a la misma altura. Un asiento demasiado bajo puede estar desaconsejado (postoperados de cadera) y resultar incómodo para levantarse.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

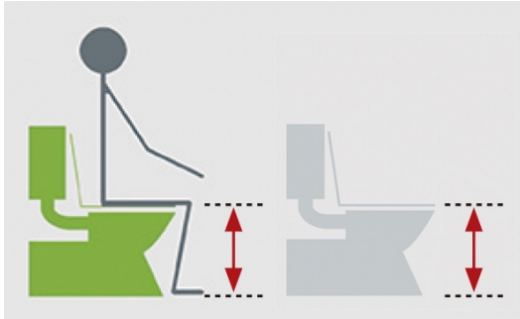

1. Mida la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla. Esta es la altura de asiento recomendada.
2. Mida la altura de su asiento actual y réstela de la primera medida.
3. La diferencia entre las dos medidas es la altura del asiento elevador requerida. Adquiera el elevador con la medida más próxima. Las disponibles en el mercado son 5, 10 y 15 cm.



Tabla de medidas y modelos

| MODELO | AD509C | AD509B | AD509A | AD509B-LUX | AD509A-LUX |
|----------------|--------|--------|--------|------------|------------|
| ALTO | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 10 cm | 15 cm |
| TAPA | No | No | No | Si | Si |
| ANCHO ORIFICIO | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| FONDO ORIFICIO | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |

