



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Grúa de elevación y traslado 'Mini fly'

AD915

<https://www.ayudasdinamicas.com/grua-de-elevacion-y-traslado-mini-fly/>



Vídeo disponible en
ayudasdinamicas.com



Descripción

La MINI FLY es una grúa compacta, de dimensiones muy reducidas, con un ancho total de tan solo 52 cm lo que facilita el acceso a espacios muy reducidos. Incorpora cuatro ruedas en la parte delantera y dos ruedas de mayor tamaño con frenos en la parte trasera, con lo que el cuidador conseguirá una mejor maniobrabilidad. Es una grúa de grandes prestaciones, como las de gran tamaño, pero con dimensiones reducidas. Soporta un peso máximo de 160 kg y gracias al diseño del mástil aumenta el espacio entre la persona y el motor de la grúa, a la vez que permite un acceso cómodo al paciente cuando hay que elevarlo de la cama.

- Permite recoger a los pacientes desde el suelo
- Elevación máxima hasta 163 cm del suelo
- Plegable, facilita el transporte y almacenaje

La altura entre las patas de la grúa y el suelo es de 8 cm de forma que es fácil acceder debajo de sillones, butacas o camas que estén a muy poca distancia del suelo.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



La caja de control dispone de una pantalla LCD en la que indica los ciclos de uso y el nivel de carga de las baterías. También incorpora un sistema de protección de sobrecarga, para no superar el peso máximo a modo de seguridad. Se puede programar la función de parada y arranque suave para aquel tipo de pacientes que necesiten un cuidado especial a la hora de la elevación y el descenso.

COMPATIBLE CON GRÚAS: AD 906 y AD 899



total



máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD915
ANCHO TOTAL	52cm
FONDO TOTAL	100cm
RANGO DE APERTURA	52 a 80cm
RANGO DE ELEVACIÓN	53 a 163cm
ALTURA DE PATAS	8cm






AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Accesorios

Arnés 'Con cabezal'.

Para las transferencias más delicadas y para ciertos casos puede ser recomendable utilizar un arnés de montaje rápido con cabezal. El paciente apoya la cabeza durante la transferencia y además se siente más arropado, dándole mayor sensación de seguridad. Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

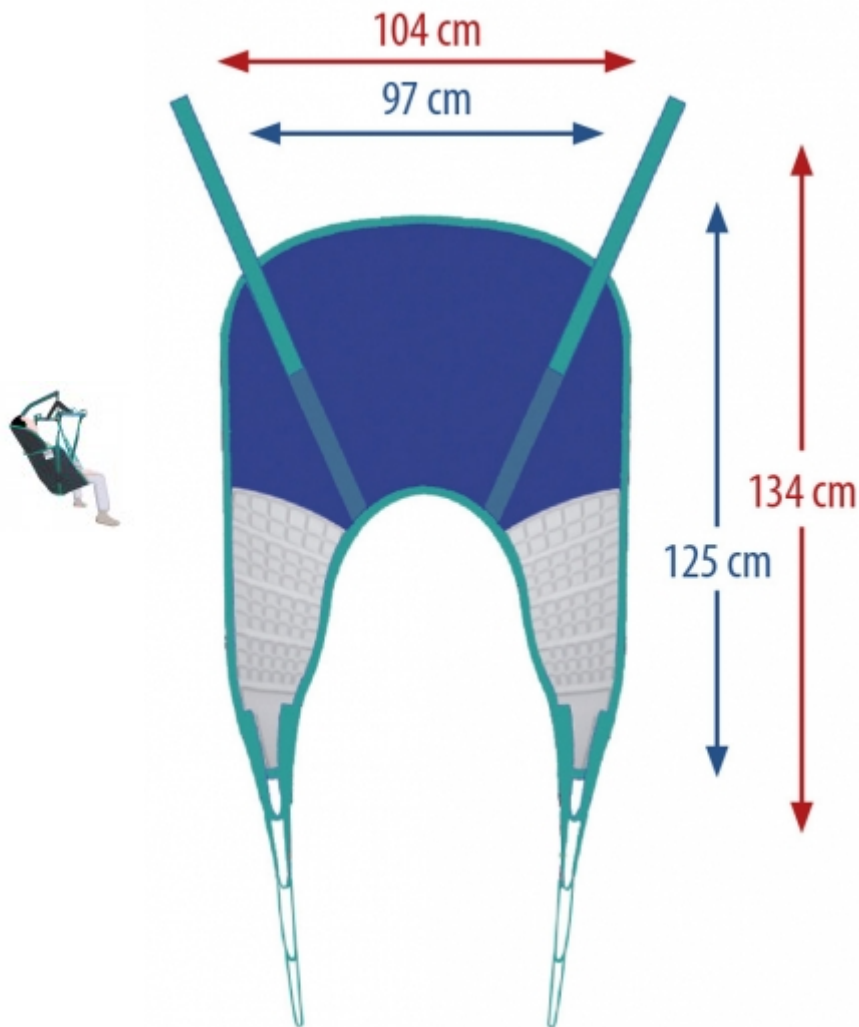

VER VIDEO AQUÍ




Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés envolvente.

Su forma envolvente esta concebida para trasladar pacientes inquietos o con ansiedad. El cuidador puede transferir al paciente sentado o recostado.

Talla única.

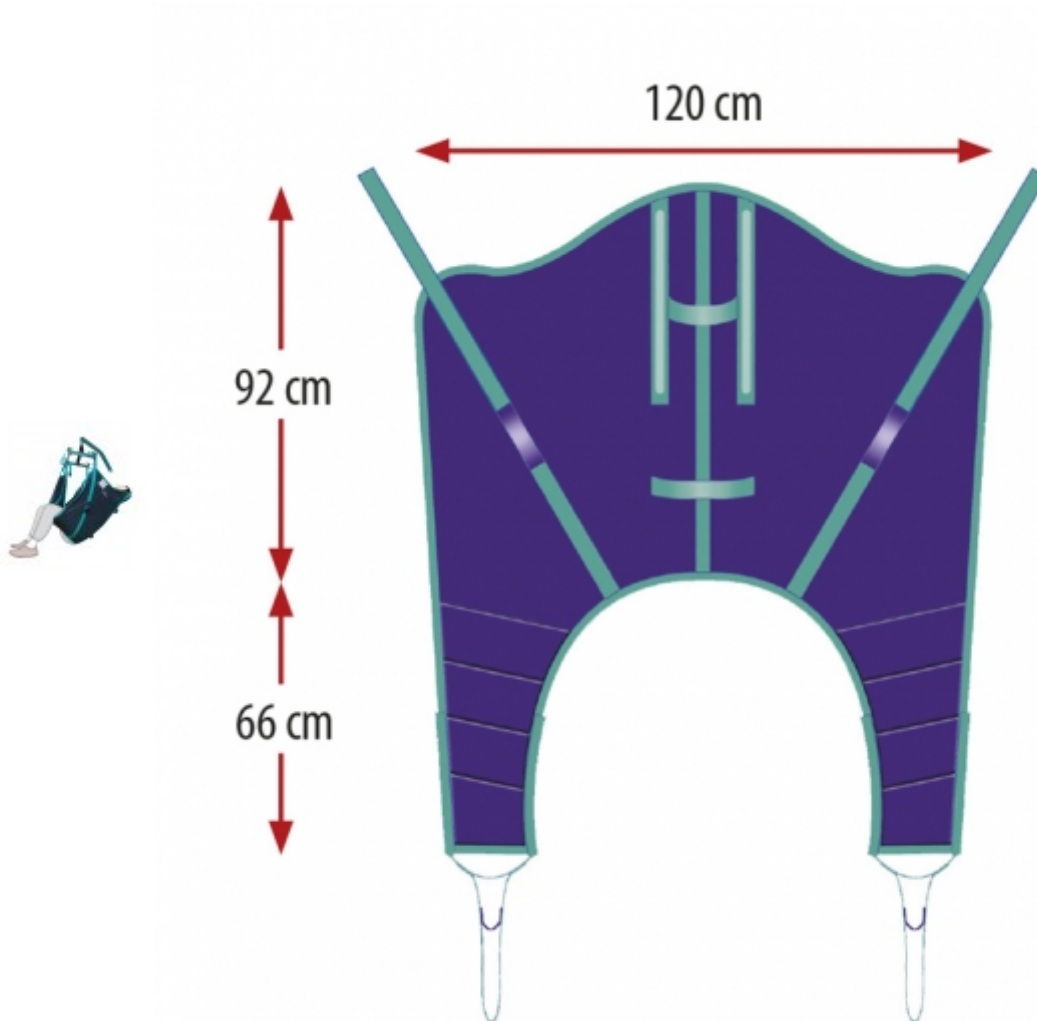

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal Confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

VER VIDEO AQUÍ




Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia


Arnés 'amputados'.

Recomendado para post operados de cadera y para amputados de miembros inferiores.

Concebido para las transferencias más delicadas. Su forma envolvente, sin constricciones en las caderas, posibilita las transferencias más difíciles tales como complicaciones en post operados de cadera o amputados.

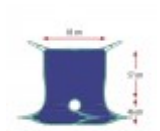

Talla única.

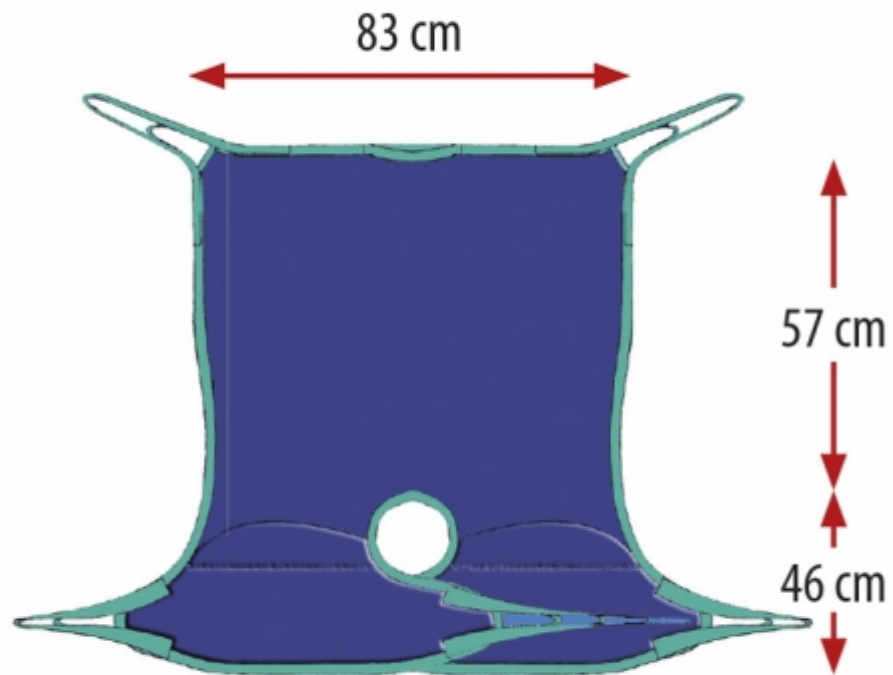




Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Arnés 'Goliath' 250 kg.

Arnés especialmente reforzado para realizar las transferencias de personas con gran sobrepeso y hacerlo con seguridad y comodidad tanto para el usuario como para el cuidador.

Talla única.

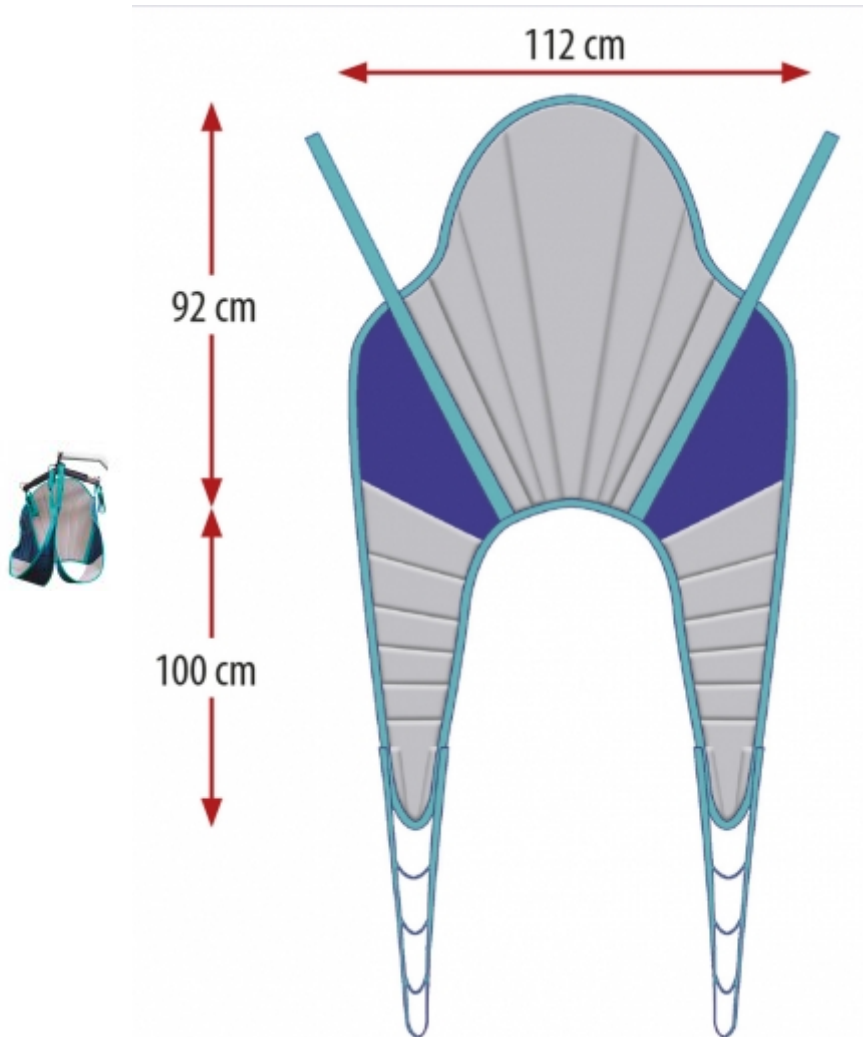

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

VER VIDEO AQUÍ




Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés económico 'Eco'-

Nuevo arnés propuesto para utilizarse con un solo paciente y así evitar contagios, por lo que es ampliamente utilizado en instituciones sanitarias. Tallas M-L.

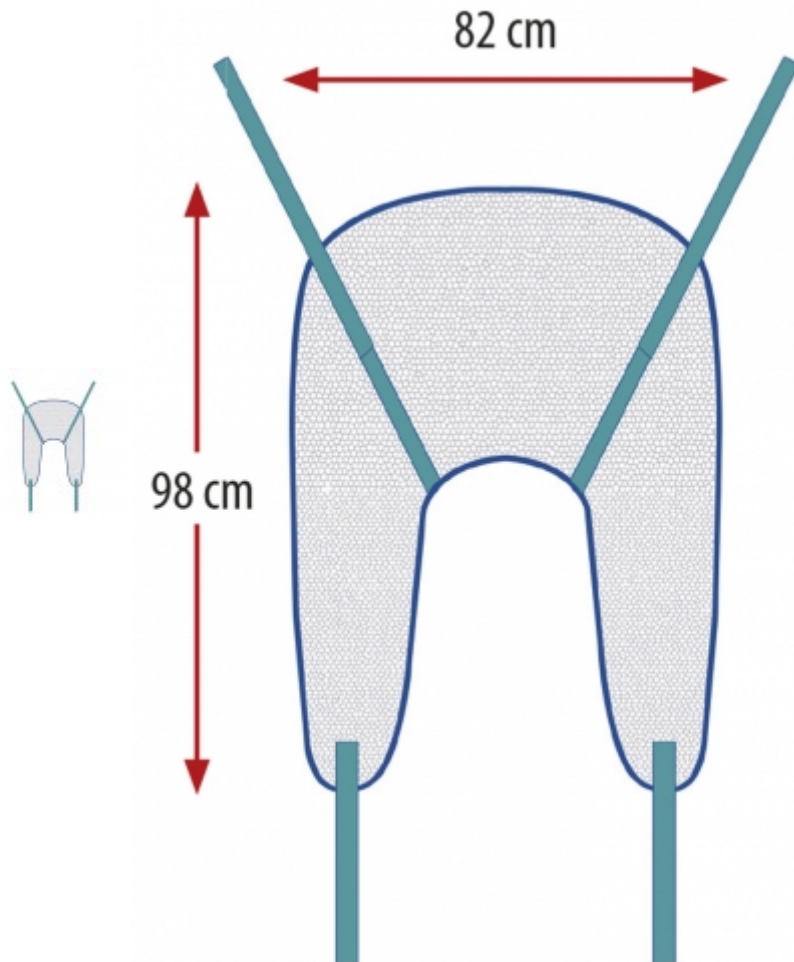

Estación de carga externa

En condiciones de uso intensivo de la grúa, por ejemplo en instituciones o residencias, es muy útil contar con una estación de carga donde tendremos una batería siempre cargada y a punto de ser utilizada y reemplazar la descargada.

Todas nuestras grúas llevan una equipación que permite extraer muy fácilmente la batería de la grúa.