



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Rampa plegable

ref: CR0101

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/rampas/rampa-plegable>



Se pliegan a lo ancho y se transportan cómodamente como una maleta. Una vez desplegadas ofrecen un ancho generoso. adaptado para el uso de sillas de ruedas manuales o electrónicas, así como de scooters.

Como todas nuestras rampas de aluminio, son ligeras, robustas y muy resistentes.



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia


#### COMO SELECCIONAR LA LONGITUD DE LA RAMPA

- Seleccione siempre la rampa más larga posible, cuánto más larga sea la rampa, menor será la pendiente a superar.

- Para usuarios independientes de silla de ruedas se recomienda una pendiente máxima de 1:7, y para sillas de ruedas manuales empujadas por un ayudante y sillas electrónicas, una máxima de 1:5.

- EJEMPLO: Para superar un desnivel de 30 cm, con una pendiente máxima de 1:5, la rampa apropiada debería tener 150 cm ( $30 \times 5 = 150$ ). Si la pendiente fuera de 1:7 ( $30 \times 7 = 210$ ), debería ser de 210 cm.

#### Altura a salvar

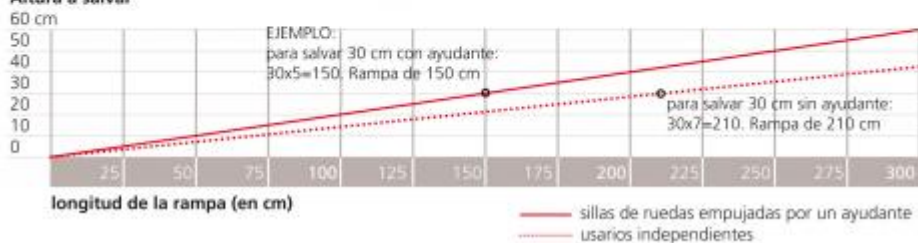

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Detalle	Largo	Ancho	Largo plegada	Ancho plegada	Peso total
RM120	Plegable	122 cm	76 cm	122 cm	40 cm	9,6 kg
RM180	Plegable	183 cm	76 cm	183 cm	40 cm	14,3 kg

