



*"La movilidad es importante para mi, y no me conformo con menos"*

La silla que se adapta a los requisitos particulares de cada persona

AS-01 es extremadamente adaptable a las necesidades de cada persona para obtener la máxima movilidad y el máximo confort, asegurándose que cada persona puede sacar el máximo rendimiento de sus capacidades. Cada una de las sillas se fabrica en Alemania según las especificaciones del cliente.

● AS-01 ÁGIL Y DINÁMICA

**Diseño eficiente.** Un diseño limpio y elegante que permite que cada persona tenga la silla correcta gracias a los numerosos ajustes y configuraciones posibles. Por ejemplo, entre otros posibles ajustes hay 22 combinaciones de fondo y ancho de asiento, 6 opciones de respaldo y toda una gama de accesorios, para crear un concepto único de silla de ruedas al mejor precio.



**Respaldo.** Tensores incluidos y 6 alturas disponibles.

**Protector de aluminio.** Además facilita las transferencias laterales.

**Fondo de asiento.** 4 posibles fondos, cada uno con dos opciones. Inclinación y altura del asiento regulables.

**Quick release.** Camber: 0° - 3°.

**Centro de gravedad regulable.** (+2cm / -8cm)

**Reposapiés.** 4 diferentes reposapiés, según las necesidades.

**Ruedas.** 3 tipos de ruedas disponibles.

12,8 kg desde  
125 kg máximo

**Fácil de configurar.** Para los profesionales que suministran a los pacientes su primera silla es importante identificar el modelo adecuado de manera simple y con unos pocos parámetros. Con la silla AS-01 esto puede hacerse con dos o tres criterios básicos (tamaño del cuerpo/peso, ancho de la cadera, ancho y fondo del asiento). Todos los otros parámetros (altura trasera y delantera del asiento, ángulo del asiento, y centro de gravedad...) pueden ajustarse directamente en la silla, o simplemente incluirlos en su pedido y recibir la silla totalmente a medida. Como resultado, normalmente es suficiente una sola entrevista con el usuario para determinar la silla adecuada.



**Conducción ágil y dinámica**

Dependiendo de las necesidades y preferencias de cada persona, se puede configurar la silla para una conducción más activa o más pasiva. Esto es posible porque la rueda propulsora trasera puede atrasarse 2 cm y adelantarse hasta 8 cm variando el centro de gravedad de la silla, a la vez que la distancia entre ruedas delanteras y traseras.



**3 posibles ruedas delanteras**

- Easy Running, aluminio, 125mm.
- Blandas antipinchazo de PU, 150mm.
- Antipinchazo de 175mm.

**Diseño elegante y funciones smart**



**Reposabrazos de altura regulable opcionales**

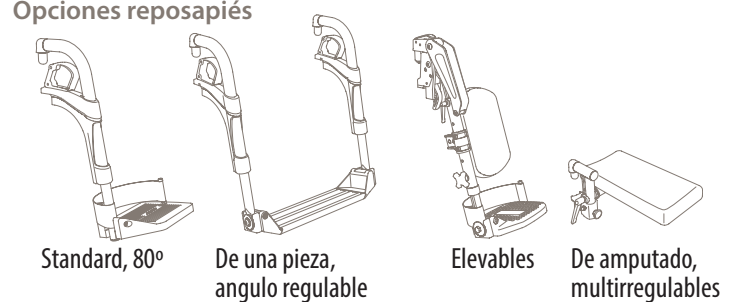


Tabla de medidas: anchos y fondos de asiento disponibles

ANCHO ASIENTO (cm)	38*	40	42	44	46	48	50	52	54	OPCIONAL SERIE
39 - Máx. 125 kg	•	•	•							
45 - Máx. 125 kg	•	•	•	•	•	•				
51 - Máx. 150 kg			•	•	•	•	•	•	•	
57 - Máx. 150 kg				•	•	•	•	•	•	

\* Esta medida solo admite plataforma/reposapiés de una pieza.

Opciones reposapiés



Standard, 80°    De una pieza, ángulo regulable    Elevables    De amputado, multirregulables