



Adjustable

ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Trolli

**Más que
una silla
plegable!**



**Funcional y
práctica**

Adjustable
Trolli

Diseño innovador para movilidad ilimitada

Adjustable Trolli de Ormesa es una silla ligera y compacta **para jóvenes y adultos**, ideal para moverse en cualquier tipo de escenario.

Es **muy fácil de plegar** gracias a su sistema patentado que **permite plegarla simplemente apretando un botón**. Una vez plegada, se mantiene compacta, ocupando el mínimo espacio.

Adjustable Trolli cuenta con una estructura **estable y resistente**, reforzada por una doble cruz situada detrás del respaldo y bajo el asiento, que proporciona una **mayor estabilidad y confort**.

El tapizado es **transpirable, resistente, fácil de lavar e ignífugo**. Esta disponible en **dos colores**: rojo y negro.

Gracias a la **amplia gama de accesorios**, satisface eficazmente todas las necesidades.



Adjustable Trolli está CRASH TESTED acuerdo a la normativa **ISO 7176/19** y **ANSI RESNA WC/19 standards**.

PRODUCT
MARKED **CE**

EL TROLLI AJUSTABLE es un **DISPOSITIVO MÉDICO** que **CUMPLE** con los **REQUISITOS DE SEGURIDAD** definidos por el Reglamento (UE) 2017/745.



Ligera y práctica

Mar, montaña, ciudad: sin problemas!



Adjustable Trolli tiene un chasis de **aluminio plegable**.

Una vez plegado, permanece compacto: esto te permite **transportarlo sobre sus ruedas traseras** como si fuera un carrito.

Su **ligereza y la facilidad para plegarse** hacen que sea sencilla de levantar o trasladar: resulta ideal si hay que almacenarla en el coche o si se quiere usar en el transporte público.

Adjustable Trolli es la solución perfecta para quienes desean combinar **estabilidad, practicidad y confort** en un solo producto.

ATENCIÓN: Tiene un sistema de seguridad que bloquea el plegado en caso de detectar peso encima del asiento.



Ajustes y datos técnicos

Tapizado

El tapizado presenta un diseño innovador **en forma de panal**, lo cual lo hace **muy transpirable** al contacto con la piel. Esta forma del tejido permite una **buena ventilación**.

El tapizado esta hecho con materiales avanzados y transpirables que aseguran confort incluso durante largas horas de uso:

> **Higiene:** al ser muy transpirable, disminuye el sudor y la acumulación de bacterias.

> **Lavado:** aunque el tapizado no es extraíble, es muy fácil de lavar.

> **Secado rápido**

> **Resistente**

> **Ignifugo:** cumpliendo con la normativa EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014.





Reposacabezas ergonómico

Ajustable en inclinación y profundidad sin necesidad de herramientas. Se ajusta en altura y se pliega junto con la silla, no es necesario quitarlo.



Respaldo

Reclinable en tres posiciones. Altura ajustable. Incluye una bolsa en la parte trasera donde se encuentra el manual y la herramienta necesaria para las regulaciones.



Asiento

El asiento es ergonómico y tiene una ligera inclinación que previene el deslizamiento de la pelvis asegurando así una mayor comodidad. Es ajustable en profundidad y en anchura gracias al accesorio 958, soportes laterales pélvicos.



Puños de acompañante

Los puños de acompañante están equipados con frenos, ideales para controlar el cochecito en diferentes entornos. Pueden regularse en altura con el accesorio 951.



Reposapiés

Ajustables en altura, son abatibles para maniobrar la silla en espacios reducidos, como un ascensor.

Las plataformas son ajustables en inclinación con el accesorio adicional 956.

También incluye una banda de sujeción en la pantorrilla para más comodidad.



Ruedas

Tienen el perfilado típico de Ormesa: solidas, ligeras y todoterreno.

Ruedas delanteras macizas. 7" (17 cm) de diámetro para las tallas 36 y 40; 8" (20 cm) de diámetro para la talla 43.

Ruedas traseras macizas con frenos de tambor, 10" (25 cm) de diámetro para las tallas 36 y 40. 12" (30 cm) de diámetro para la talla 43.

Accesorios



838 Soportes laterales de tronco
Se pueden ajustar en altura, anchura y rotación. Esta disponible en dos tallas.



958 Soportes laterales de pelvis



868 Soportes envolventes y flexibles de tronco.
Permite ajuste en altura, anchura y rotación,



947 Cinturón pélvico de 2 puntos
Disponible en dos tallas.



920 Cinturón pélvico de 4 puntos
Disponible en dos tallas.



853 Arnés de 4 puntos

Accesorios



853 Arnés ligero de cuatro puntos.



834N Taco abductor
Fácilmente extraíble. Disponible en dos tallas.



839 Manillar delantero
Ajustable en inclinación. Fácilmente extraíble para poder plegar la silla.



960 Cinta para las taloneras



956 Plataformas ajustables en inclinación



858 Cesta de almacenamiento

Accesorios



812 Bloqueo de dirección para las ruedas delanteras



844 Fundas de protección para los laterales



951 Puños regulables en altura
Aumenta la altura total en 7 cm (de 94cm a 101 cm)




891 Anclajes para transporte en vehículos
Para el transporte de la silla en un vehículo (coches, buses..).




Adjustable Trolli **medidas y pesos**

Unidades: cm; kg

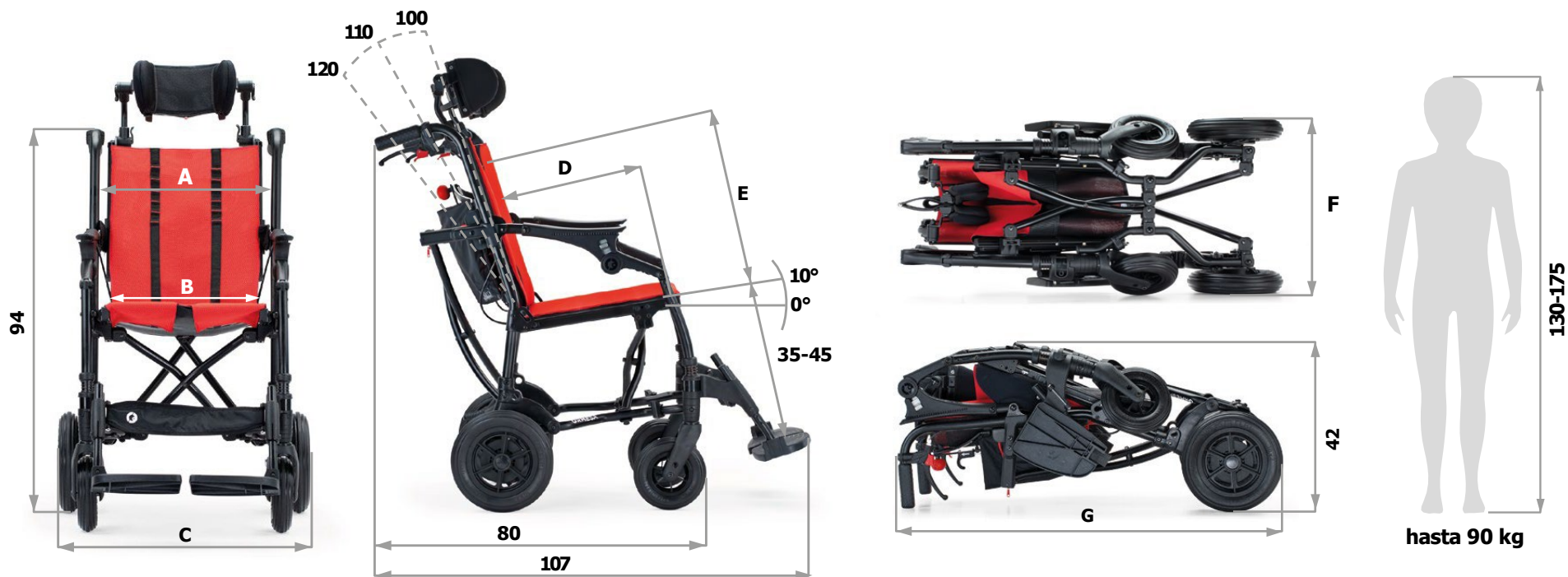

	A	B	C	D	E	F	G	Peso total
talla 36	39	36 - 32 - 28 *	59	36-46	46-56	42	94	15,1
talla 40	43	40 - 36 - 32 *	63	36-46	46-56	46	94	16,1
talla 43	46	43 - 39 - 35 *	66	36-46	46-56	46	97	17,1

* Utilizando los soportes laterales pélvicos 958, la anchura se reduce en 4 cm o 8 cm sin el acolchado interior. 36-40-43 cm de anchura sin soportes laterales pélvicos.

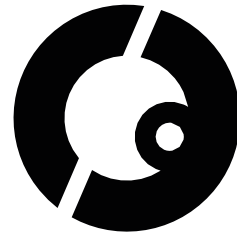

 Normativa de MDR (EU) 2017/745

www.ayudasdinamicas.com