



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

GRILLO
adaptive seating





Más que una simple silla.

Grillo Adaptive de Ormesa es una trona **compacta** con una gran variedad de ajustes y configuraciones diseñada para niños y adolescentes con necesidades especiales. Es ideal para una gran variedad de situaciones cotidianas tanto de la escuela como del hogar.

El sistema patentado a nivel mundial de ajuste de altura, propio de "la familia GRILLO", permite un ajuste rápido y preciso de la altura de la trona con un diseño de **base compacta**, que **ahorra espacio**.

Grillo Adaptive tiene una tapicería **transpirable, duradera, fácil de lavar e ignífuga**.

El acolchado es extraíble y está fabricado con un **material innovador**: permite una **excelente distribución del peso**, es **muy transpirable y muy cómodo**. Está disponible en tres colores: rojo, rosa y azul.

Con un **gran variedad de accesorios disponibles**, se adapta fácilmente a cualquier necesidad. Disponible en **tres tallas**.

PRODUCTO
CE



LA GRILLO ADAPTIVE ES UN PRODUCTO SANITARIO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DEFINIDOS POR EL REGLAMENTO (UE) 2017/745



Tres configuraciones para cualquier necesidad

Grillo Adaptive de Ormesa es una trona diseñada para satisfacer las necesidades **tanto de los cuidadores como de los niños**. La trona se convierte en una herramienta fundamental en el desarrollo del niño para realizar cualquier actividad; para él supone la capacidad de ver el mundo que le rodea con una nueva perspectiva, sentirse más incluido en las actividades diarias y poder comunicarse con los demás y sentirse incluido. Hay tres tipos de reposacabezas disponibles para satisfacer todas las necesidades:

Grillo Adaptive Seating con el **accesorio 863 reposacabezas ergonómico** es compatible para niños que necesitan un soporte y control en la cabeza con ajustes en inclinación y profundidad.

Grillo Adaptive Seating con el **accesorio 865 reposacabezas acolchado** o el **accesorio 835 reposacabezas perfilado**, dependiendo de la necesidad de un soporte lateral o occipital.





863 Reposacabezas ergonómico Ajustable en altura, ángulo y profundidad para adaptarse a la forma de la cabeza.

865 Reposacabezas acolchado
ajustable en altura



835 Reposacabezas perfilado con ajuste de altura y soportes laterales y occipitales.



Excelencia

Tapizado de ultima generación


La trona Grillo Adaptive ofrece un tejido transpirable, cómodo, resistente, fácil de limpiar y de secado rápido, compuesto por:

Tapizado resistente y no desenfundable: el diseño de su tejido proporciona mucha transpirabilidad y reduce **el sudor y la formación de bacterias**. Este tejido permite una fácil higiene y lavado con tiempos de secado muy rápidos. Es ignífugo.

La funda extraíble está fabricada con material muy transpirable y de alta calidad, tanto en el interior como en el exterior. El relleno interior tiene **una estructura muy innovadora**, tridimensional y **ligera**, que proporciona una circulación del aire extremadamente alta, **una distribución óptima del peso** y un **confort excelente**. El tejido exterior también es muy resistente a las abrasiones.



Tapizado resistente, no desenfundable

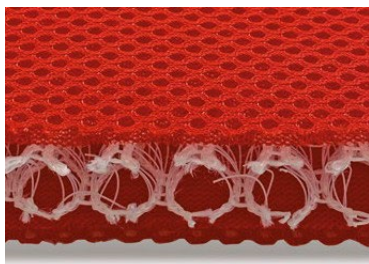

Funda extraíble





Práctico & cómodo

La versatilidad que necesitas

Grillo Adaptive Seating tiene un **chasis plegable de aluminio**.

Las cuatro ruedas incluyen frenos, y permiten desplazar la trona de una habitación a otra incluso con el niño sentado.


El sistema patentado de ajuste de altura, activado por **pistones de gas**, facilita el cambio de altura de la silla mientras el niño está sentado. Es perfecto para alcanzar diversas mesas y superficies de trabajo de forma cómoda y segura y haciendo más fácil que se baje de la silla.

Un sistema de seguridad evita la activación involuntaria.

Gracias a su diseño, la trona **se adapta a cualquier entorno**, lo que permite al niño participar en las actividades cotidianas e interactuar con la familia y otros niños.




Características técnicas y ajustes

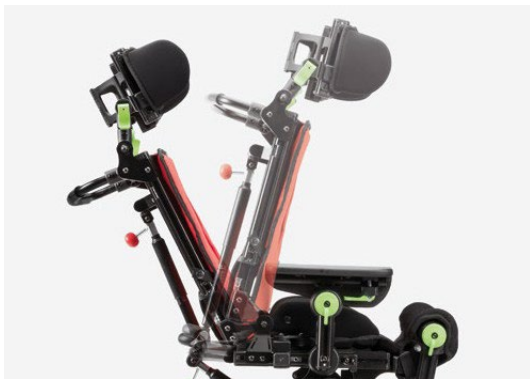

Respaldo

Reclinable cómodamente con un pistón de gas de forma fácil y segura. Fácilmente plegable para su transporte.

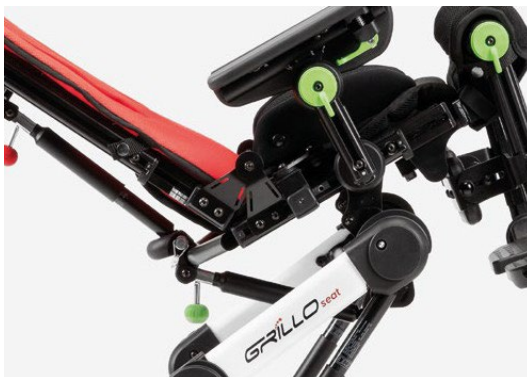

Asiento

Ergonomico y basculante con un pistón de gas, para que el ajuste sea más cómodo y fácil. Ajustable en profundidad y en anchura gracias a los soportes laterales multiajustables.



Soportes laterales pélvicos acolchados y multiajustables

Permite ajustes en rotación, anchura y profundidad para una mayor personalización.



Reposabrazos

Permite un ajuste suave de altura y de inclinación

Reposapiernas


Ajustable en altura, inclinación y profundidad junto con el asiento.

Pantorillas

Suaves y ajustables en altura y profundidad.

Plataformas

Ajustables en inclinación y en flexión-extensión.

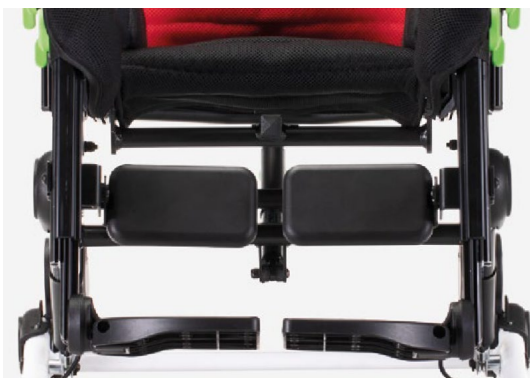



Accesorios



947 Cinturón pélvico

Disponible en tres tallas. Equipado de serie.



920 Cinturón pélvico de cuatro puntos


Disponible en dos tallas.



838 Soportes laterales de tronco


Permite ajuste en altura, anchura y rotación, y está disponible en tres tallas.

Cubierto con un tejido acolchado y transpirable, extraíble para el lavado.

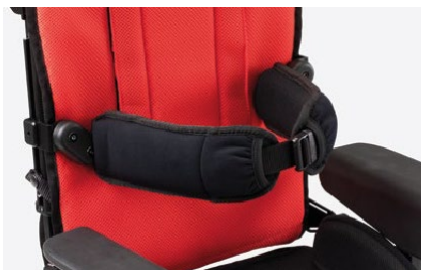

868 Soportes envolventes y flexibles de tronco.

Permite ajuste en altura, anchura y rotación, y está disponible en dos tallas.

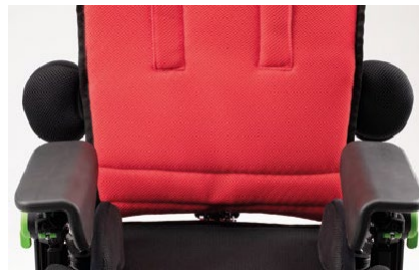

961 Soportes laterales de codos.

Cubierto con un tejido acolchado




853 Arnés

Disponibles en dos tallas

Accesorios



853 Arnés de 4 puntos.

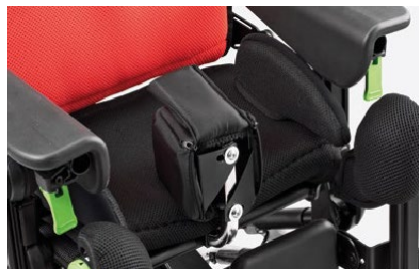

834R Taco abductor ajustable
en profundidad y abducción.
Disponible en dos tallas.



834N Taco abductor estrecho
Ajustable en profundidad junto con el
sillón. Disponible en dos tallas.



824 Mesita auxiliar
Ajustable en profundidad, altura y
inclinación junto con los reposabrazos.
*Está fabricado con material resistente
y higiénico, diseño sin bordes, no
retiene residuos de comida.*




960 Cinta para las taloneras



**962 Soporte de pies +
cinta para las taloneras**

Grillo Adaptive medidas y pesos

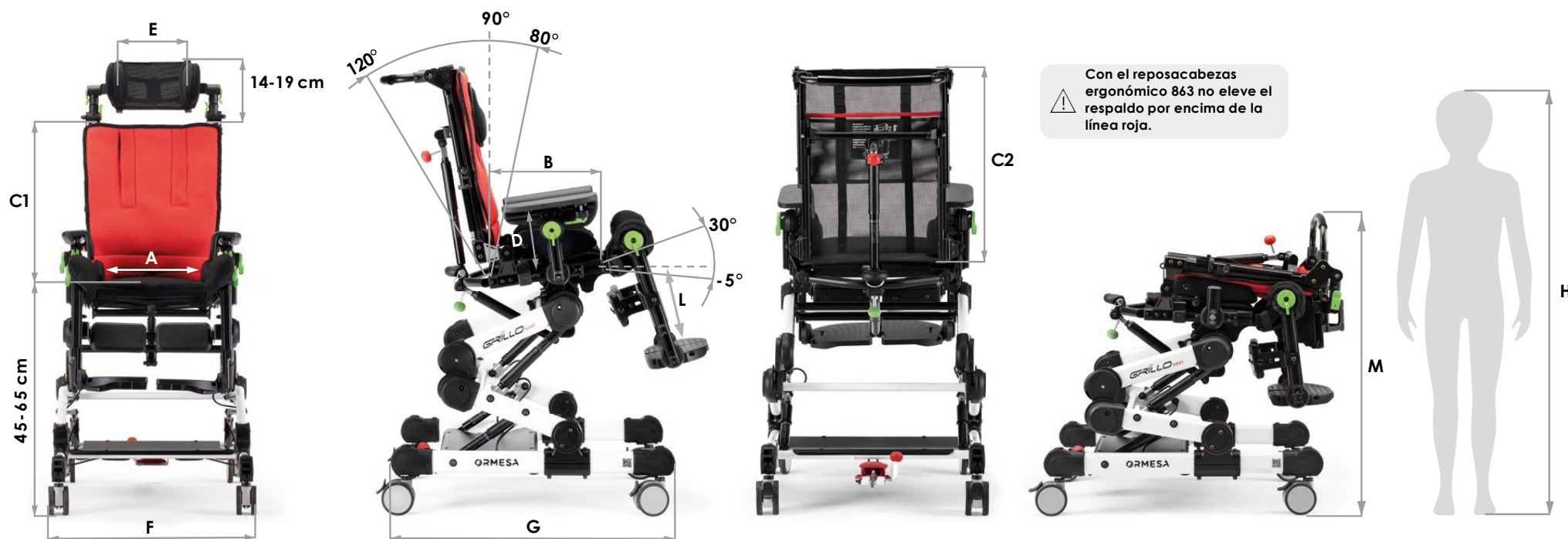


	A	B	C1	C2	D	E	F	G	L	M	Altura del usuario (H)	Peso Grillo	Cap. Total
mini	16-26 cm	16-26 cm	30-41 cm	30-50 cm	12-15 cm	15 cm	49 cm	59 cm	15-25 cm	68 cm	75-105 cm	20,4kg	25 kg
Small	20-30 cm	20-30 cm	35-47 cm	35-60 cm	15-20 cm	17cm	53 cm	65 cm	20-31 cm	68 cm	90-120 cm	22,6 kg	35 kg
Medium	25-35 cm	28-43 cm	40-55 cm	40-70 cm	16-20 cm	20 cm	58 cm	74 cm	25-40 cm	70 cm	110-145 cm	24,3 kg	45 kg

Los números separados por guiones indican el margen mínimo y máximo de ajuste.

Tessa y su historia te esperan en la web oficial de Ormesa, junto con otros protagonistas de nuestra fantástica comunidad



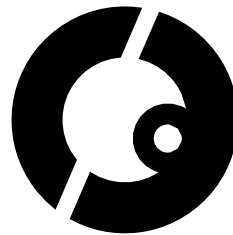

Un agradecimiento especial a las familias que participaron con ilusión en nuestro proyecto. Es gracias a nuestros clientes y a sus historias que encontramos la energía y el estímulo para evolucionar día a día.

CE complies with MDR (EU) 2017/7

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

www.ayudasdinamicas.com